



BG5整体功能

注：Api调用必须为串行调用，即当上一个Api结束后，才可以调用下一个Api，否则会出现Api功能失效。

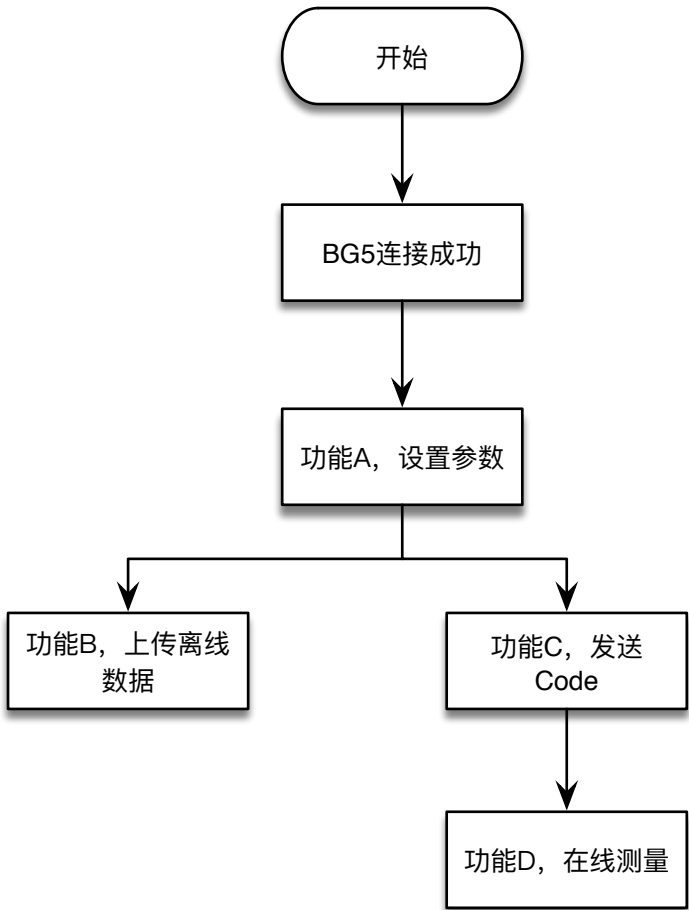

BG5 功能A – 参数设置功能

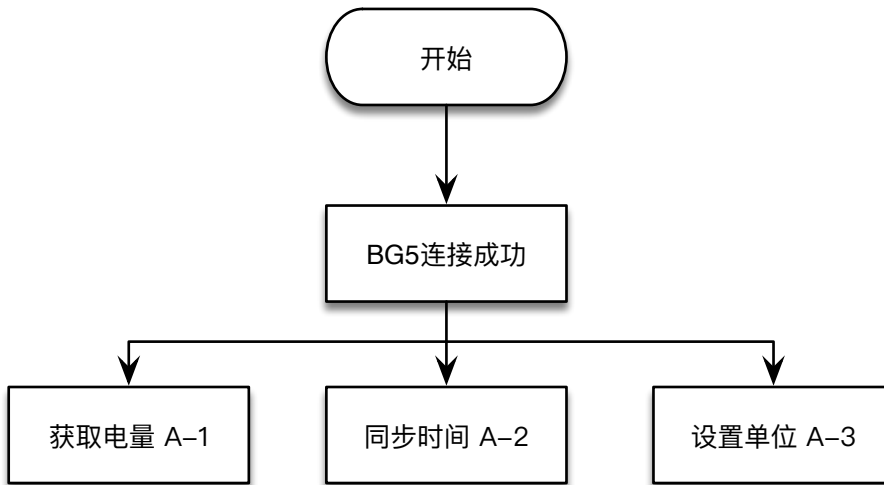


A-1: **public void** getBattery()

A-2: **public void** setTime()

A-3: **public void** setUnit(**int** type)

BG5 功能B – 上传离线数据流程


注：使用BG5的离线测量功能前，必须调用Api (A-2),否则离线数据时间可能会错误

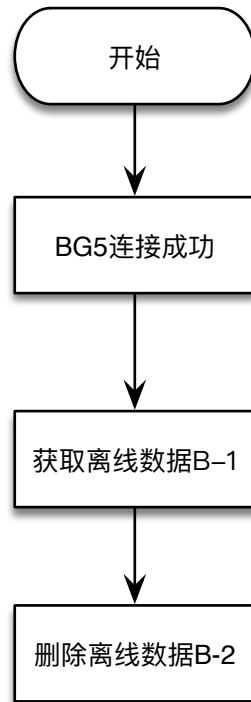

B-1: **public void** getOfflineData()

B-2: **public void** deleteOfflineData()

BG5 功能C – 发送Code流程

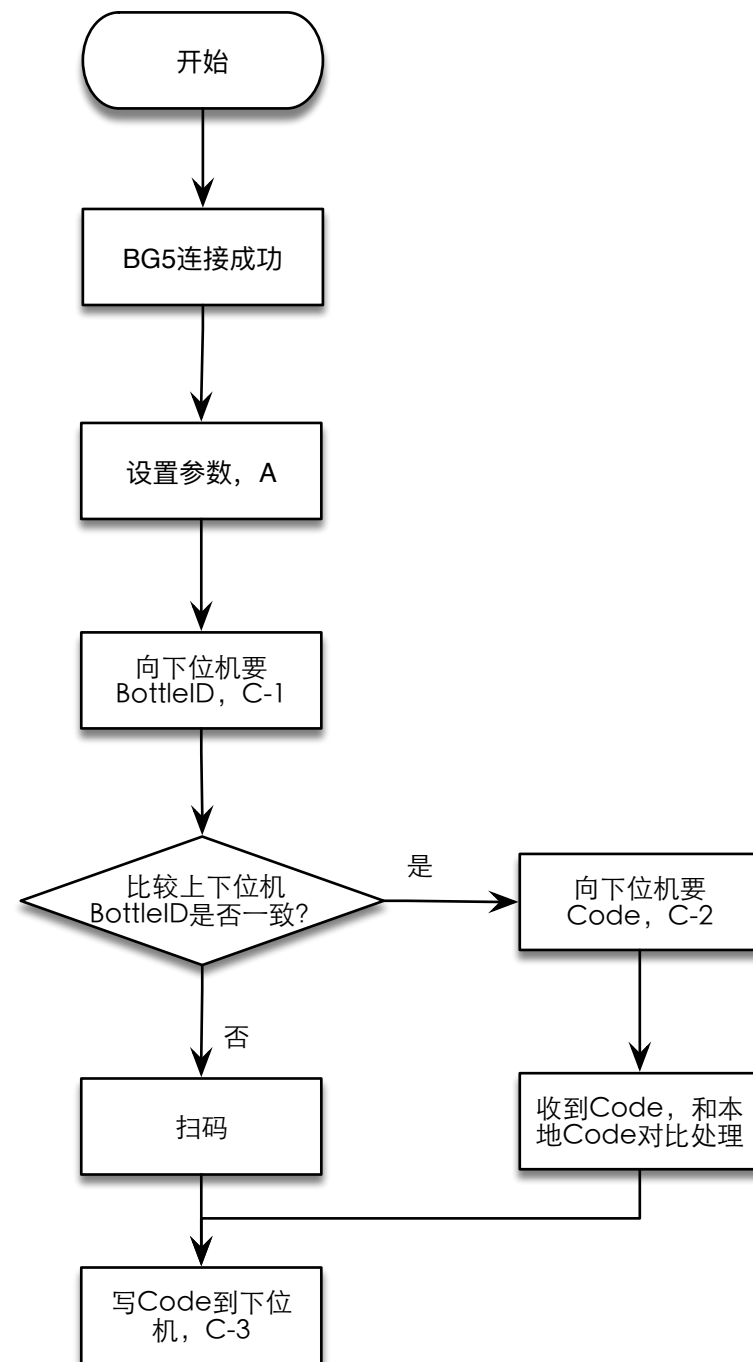


C-1: `public void` getBottleId()

C-2: `public void` getBottleMessage()

C-3: `public void` setBottleMessage(String QRCode, `byte` stripNum, String overDate)
OR `public void` setBottleMessage(String QRCode)

BG5 功能D – 在线测量流程

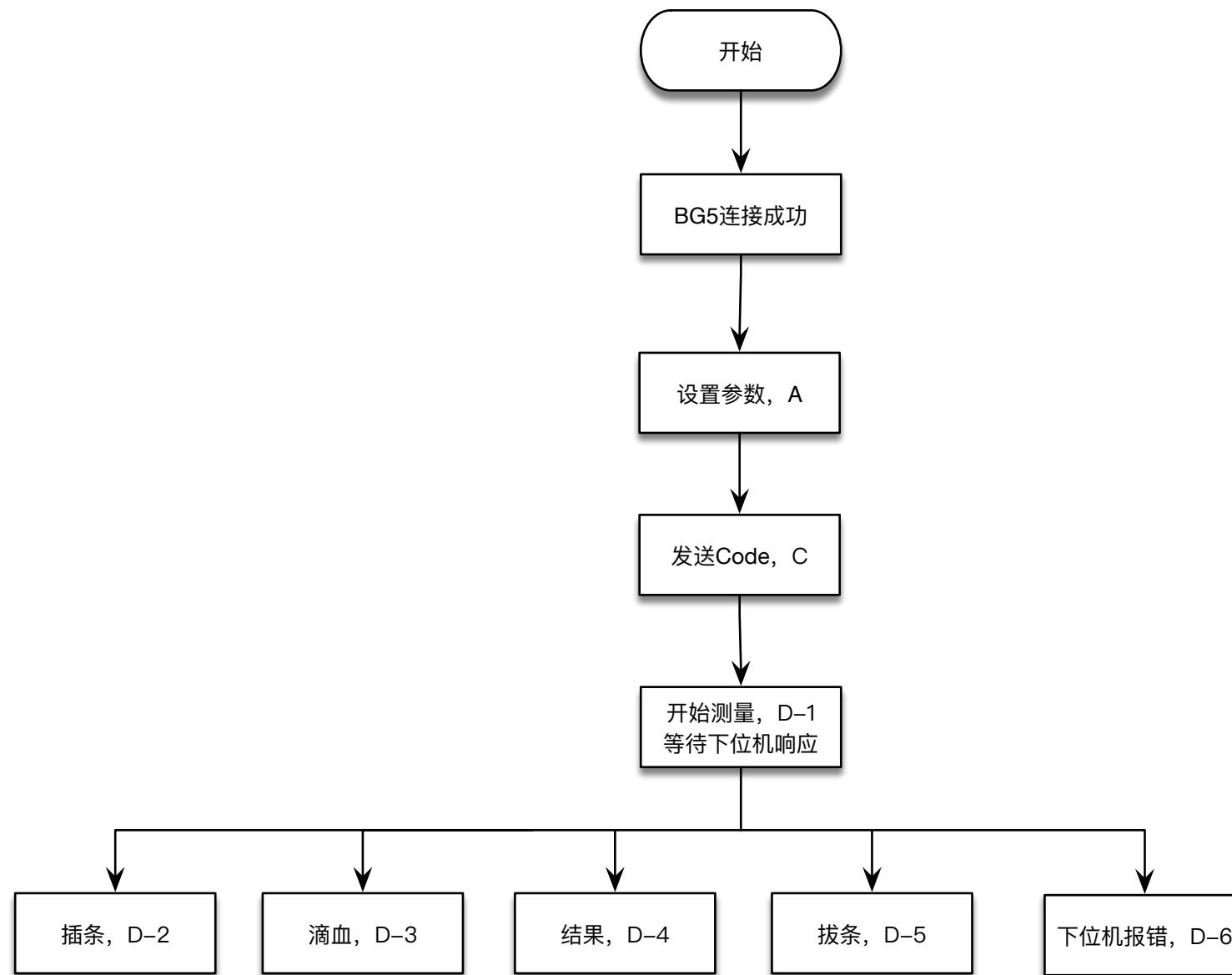

D-1: `public void startMeasure(int type)`

D-2: `action_measure_strip_in`

D-3: `action_measure_get_blood`

D-4: `measure_result`

D-5: `action_measure_strip_out`

D-6: `action_measure_error`